

Obsah balení



Odměrka na vodu



Zkumavka s práškem



Nalepovací štítek



2 plastové sáčky



Absorbční vložka



Permanentní fix

**Před odběrem** alespoň hodinu nejezte, nepijte sycené nebo slazené nápoje a neprovádějte hygienu úst.

**Prášek ve zkumavce** je určen ke stabilizaci, nevysypávejte ho a nekonzumujte!



Vážený zákazníku, upozorňujeme, že kurýr čeká maximálně **10 minut**.



Max 10 min

1



Nejdříve vyplňte **elektronickou žádanku** na webu **lab-chromozoom.cz**

Po úspěšné registraci v SMS/e-mailu obdržíte **devítimístný kód** (ve formátu GHCXXXXXXXXX).



2



Do odměrky napustěte **5 ml** vody.

3



Zhluboka se nadechněte a zakašlejte.

4



20-30 s

Vodu z odměrky kloktejte 20 až 30 vteřin.

*Pokud omylem polknete, postup opakujte od bodu č. 2*

5



Vykloktaný obsah úst vyplivněte zpět do odměrky.

6



Obsah odměrky opatrně přelijte do zkumavky.


*Ve zkumavce je stabilizační prášek, který nesmíte vysypat.* ⚠

7




Zkumavku pečlivě uzavřete a potřepete.

8

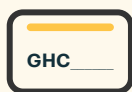

Fixou na štítek vyplňte jméno, tel. číslo a devítimístný kód z e-žádanky (ve formátu GHCXXXXXXXXX).

*Bez kódu nemůže být vzorek vyhodnocen!* ⚠

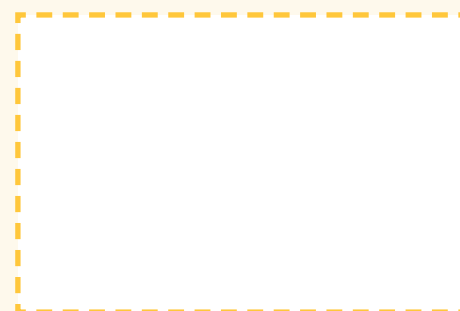

9



Vyplněný štítek nalepte na zkumavku.

10

Zkumavku společně s absorbční vložkou nejdříve vložte do průhledného a následně do černého sáčku.



*Nevkládejte zpět do krabičky!*

11



Zabalenu zkumavku zanechte kurýrovi na předem určenem místě. Kurýr ji převezme bezkontaktně.



**Výsledek** obdržíte do druhého dne formou SMS a e-mailu.

Package contents



Measuring cup



Collection tube



Adhesive label



2 black plastic bags



Absorbent pad



Marker pen

**Do not eat**, drink carbonated drinks, or perform oral hygiene for at least one hour before the collection of the sample.

The **powder** in the collection tube is needed for stabilization. Do not spill it out or consume it!



Dear customer, please note that the courier will wait a maximum of **10 minutes**.



**Max 10 min**

**1**



First of all, fill in the electronic application form at [lab-chromozoom.cz](https://lab-chromozoom.cz)

After successful registration, you will receive a **9-digit code** (in the format GHCXXXXXXXXX) by SMS / e-mail.



**2**

Put **5 ml** of water into the measuring cup.



**3**

Take a deep breath and cough.



**4**

Gargle the water for 20 – 30 seconds.

*If you accidentally swallow, repeat the procedure from the 2nd step.*



20 - 30 s

**5**

Spit the gargled contents back into the measuring cup.



**6**

Carefully pour the contents of the measuring cup into the collection tube.



*Do not spill out or consume the powder inside of the tube.*



**7**

Close the tube very carefully and shake it.



**8**

With a marker pen, fill in the name, phone number and 9-digit code from the electronic application form (in the format GHCXXXXXXXXX).



*The sample cannot be evaluated without the code!*



**9**

Stick the filled-out label onto the collection tube.



**10**

First place the tube, together with the absorbent pad, into the transparent bag, and then into the black zip bag.



**11**

Leave the packaged tube in a predesignated place for the courier. The courier will pick it up contactlessly.



You will **receive the results** by the next day via SMS and via e-mail.



*Do not put back in the box!*